




OXY+

Дезинфицирующее средство для ПСО,
ДВУ и стерилизации

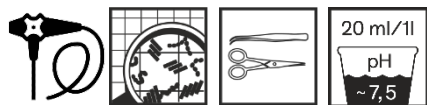

Объекты/области
применения

- Предварительная, предстерилизационная (окончательная перед ДВУ) очистка изделий медицинского назначения, включая термолabile хирургические и стоматологические инструменты и материалы, эндоскопы и инструменты к ним, ручным или механизированным (в УЗ-установках) способом
 - ДВУ эндоскопов механизированным способом и в специальных установках
 - Стерилизация изделий медицинского назначения
 - Дезинфекция поверхностей, приборов и аппаратов
 - Дезинфекция объектов при особо опасных инфекциях (холера, туляремия, сибирская язва)
- Расширенный список областей применения указан в инструкции.

Характеристики
продукта

Средство представляет собой гранулированный порошок, произведенный методом синтеза. Действующим веществом в рабочем растворе препарата является надуксусная кислота и активный кислород. Рабочие растворы обладают широким антимикробным действием, а также спороцидной активностью. Благодаря нейтральному pH, рабочие растворы обладают отличным моющим свойством, легко отмываются органические загрязнения, что делает возможным проводить ПСО, совмещенную с дезинфекцией. Принцип действия препарата - окисление. Растворы имеют короткое время экспозиции и высокую микроцидную эффективность при низких концентрациях. Рабочий раствор не нужно подогревать, и он не имеет раздражающего запаха. Очень экономичен в отделениях, требующих ежедневной замены растворов. Подходит для чувствительных поверхностей и материалов, но не рекомендуется использовать для цветных металлов без защитного гальванического покрытия. Использованный раствор безопасен для окружающей среды и может утилизироваться в сточную систему.

Инструкция по
использованию и
дозировке

Рабочие растворы препарата готовят в пластмассовых, эмалированных, стеклянных или металлических, из нержавеющей стали, емкостях. Для приготовления раствора используйте прилагающуюся мерную ложку (15 мл = 10 г). Растворите нужное количество порошка в теплой воде, имеющей температуру 22-30°C, тщательно размешивайте в течение 5-10 минут. Некоторое вспенивание может наблюдаться в процессе приготовления рабочего раствора. Соблюдайте правила безопасности, используйте СИЗ.

Точные данные по приготовлению рабочих растворов нужной концентрации приведены в инструкции.

При обработке необходимо строго соблюдать время экспозиции и концентрацию.

Тщательно промойте инструменты после вымачивания. Ежедневно заменяйте использованный раствор.

Рабочий раствор можно использовать в течение 36 часов.

Дозировка

	Вирусные, бактериальные (вкл. туберкулез, кандидозы, дерматофитии)	Хирургические инструменты, в т.ч. стоматологические, а также изделия из резины, металла, пластмасс и стекла	1,0%	10 мин
			2,0%	5 мин
	Вирусные, бактериальные (вкл. туберкулез, кандидозы, дерматофитии)	Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним	1,0%	10 мин
			2,0%	5 мин
	ДВУ	Жесткие и гибкие эндоскопы	1,0%	10 мин
			2,0%	5 мин
	Стерилизация	Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, стоматологические и хирургические инструменты	1,0%	30 мин
			2,0%	15 мин

Внимание

Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза их следует обильно промыть водой в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия. Избегать попадания пыли, использовать надлежащие средства индивидуальной защиты.

Состав

Активные компоненты	Воздействие	
Перкарбонат натрия	> 30 %	
ТАЕD	15-30 %	
Лимонная кислота	< 5 %	
Неионогенные ПАВ	< 5 %	
Фосфонаты	< 5 %	

рН рабочего раствора

ок. 7,5

Внешний вид и запах

Гранулированный порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде.

Хранение

Хранить в закрытой упаковке изготовителя при температуре от 0°С до плюс 25°С в темном, сухом месте, защищённом от попадания прямых солнечных лучей. Срок годности – 2 года с даты изготовления невскрытой упаковке производителя. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, нагревательных приборов. Срок годности готового раствора 36 часов.

Окружающая среда и безопасность

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта.

Виды упаковки

Средство расфасовано в полимерные емкости вместимостью 1.5 кг

Код продукта, размер упаковки

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Виды Упаковки
4 шт. по 1,5 кг.	205485	4607070477273	полимерная емкость вместимостью 1.5 кг