




Instrudes Forte

Дезинфицирующее средство

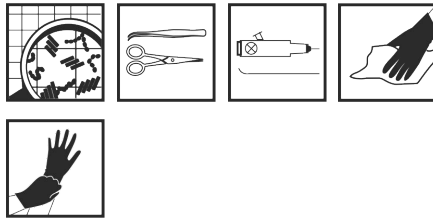

Объекты/области применения

Дезинфицирующее средство с широким спектром действия, включая вирулицидный и туберкулоцидный эффект. Также обладает моющими свойствами.

Области применения:

- дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения, хирургического и стоматологического инструментария;
- предстерилизационная и окончательная очистка жестких и гибких эндоскопов, кувезов, реанимационных и пеленальных столов, наркозно-дыхательной аппаратуры;
- обеззараживание поверхностей и предметов обстановки в медицинских организациях;
- проведение генеральных уборок.

Характеристики продукта

- Предназначено для ручного мытья и дезинфекции путем замачивания в растворе инструментария и других изделий медицинского назначения.
- Возможно использование средства в устройствах ультразвуковой очистки.
- Средство отлично справляется с удалением загрязнений и эффективно по микробиологическим параметрам.
- Не портит обрабатываемые объекты, не вызывает коррозии металлов.
- Концентрация рабочего раствора и время экспозиции влияют на эффективность действия средства. Подробнее о режимах использования средства можно ознакомиться в Инструкции.
- По параметрам острой токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ.

Инструкция по использованию и дозировке

Средство использовать согласно инструкции.

Концентрации рабочих растворов: 0,25-12,0%

Экспозиция: 30-120 минут.

Рабочий раствор готовится в чистой прохладной (+20°C) воде.

Срок годности рабочего раствора составляет 21 сутки.

Растворы дезинфицирующих средств в режиме очистки, совмещенной с дезинфекцией, применяются до изменения внешнего вида, но не более одной рабочей смены.

Внимание

Избегать разбрызгивания средства. Используйте защитные перчатки и соответствующие средства защиты

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Неионогенные ПАВ	5-15%	Понижают поверхностное натяжение воды, увлажняют обрабатываемую поверхность, эффективно отделяют загрязнения
Дидецилметиламоний хлорид	5-15%	Дезинфицирующий компонент
Феноксиэтанол	<5%	Дезинфицирующий компонент
N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин	<5%	Дезинфицирующий компонент

	Триэтаноламин	<5%	Дезинфицирующий компонент
рН продукта	ок. 11.0		
рН рабочего раствора	ок. 10,0		
Плотность	0,996 кг/дм ³		
Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость.		
Хранение	Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С. Срок годности - 3 года с даты производства в невскрытой упаковке.		
Окружающая среда и безопасность	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку. Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта		
Упаковочные материалы	1 л квадратная бутылка: бутылка - 02 PE-HD, крышка - 05 PP 5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP		
Код продукта, размер упаковки	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код
	12 x 1 л	205287	4607070470441
	3 x 5 л	205288	4607070473404
	Упаковка		
	квадратная бутылка		
	канистра		