




Combides

Дезинфицирующее средство

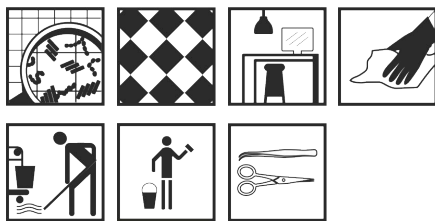

Объекты/области применения

- Дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях
- Обеззараживание наружных поверхностей медицинских приборов и оборудования, предметов ухода за больными, куветов, аптечной посуды и других объектов обстановки в ЛПУ
- Проведение профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в медицинских организациях любого профиля, а также в детских дошкольных и школьных учреждениях и на пищевых предприятиях
- Дезинфекция медицинских отходов класса А, Б и В, пищевых и прочих биологических отходов
- Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, медицинских изделий, окончательная очистка перед ДВУ и предстерилизационная очистка, не совмещенная с дезинфекцией, эндоскопов ручным и механизированным способами

Характеристики продукта

- Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции; овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней.
- Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
- Средство несовместимо с синтетическими и натуральными мылами, сульфированными маслами, стиральными порошками и другими анионными поверхностно-активными веществами.
- Средство биоразлагаемое и экологически безопасное, относится к 4 классу опасности.
- Средство сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания.

Инструкция по использованию и дозировке

Дозировка: от 0,1 до 5%, в зависимости от объекта обработки и желаемого времени экспозиции

Рабочий раствор готовится в чистой прохладной воде (+20°C).

При необходимости после обработки средством проводится влажная уборка и высушивание поверхности.

Подробная информация об использовании средства и его дозировках представлена в Инструкции № 6/23 по применению дезинфицирующего средства Combides (Комбидез).

Внимание

Избегать разбрызгивания средства. Используйте защитные перчатки и соответствующие средства защиты.

Состав

Активные компоненты		Воздействие
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид	5-15%	Дезинфицирующий компонент
Неионогенные ПАВ	<5%	Понижают поверхностное натяжение воды, увлажняют обрабатываемую поверхность,

		эффективно отделяют загрязнения	
N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин	<1%	Дезинфицирующий компонент	
Лимонная кислота	<1%	Регулятор кислотности	
Функциональные добавки			
8.0-9.0			
8.0-9.0			
1,005 – 1,015 кг/дм³			
Прозрачная жидкость светло-желтого цвета со специфичным запахом.			
Хранить на складе в упаковке производителя в защищенных от влаги и солнечных лучей местах при температуре от +5°С до +30°С. Срок хранения - 3 года с даты производства. Срок годности рабочих растворов – 30 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.			
Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.			
Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта			
1 л квадратная бутылка: бутылка - 02 PE-HD, крышка - 05 PP			
5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP			
Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
12 x 1 л	205117	4607070470762	квадратная бутылка
3 x 5 л	205113	4607070470779	канистра